

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОР {SIX PACK}

1. Как работи устройството?

Електростимулаторът {Six Pack} използва нисък електрически ток, за да свива мускулите ви, като осигурява нежен масаж или ефект на стягане на мускулите:

- Отпускане на напрежението в мускулите на рамената, гърба и корема
- Подобряване на мускулния тонус
- Масаж

2. Спецификации:

Захранване:	Алкална батерия 1,5 V AAA x 2EA
Режими на работа:	A-F (6 режима)
Честота:	1 ~ 100 Hz
Продължителност на програмата:	12 минути
Изход:	Макс. 9,8 mA
Размер:	21x10x2,3 cm
Тегло:	57,4 g

3. Функции на продукта:

3.1. Терапия с ниска честота


С помощта на електричество устройството създава импулс с ниска честота, който има положителен ефект върху тялото. Може да зададете избран от вас интензитет. Ниската честота има нежен, подобен на масаж ефект върху тялото.

3.2. Избирайте между 6 програми

3.2.1. Лесен избор между 6 режима на работа

3.2.2. Програмата автоматично се изключва след 12 минути

4. Как се използва

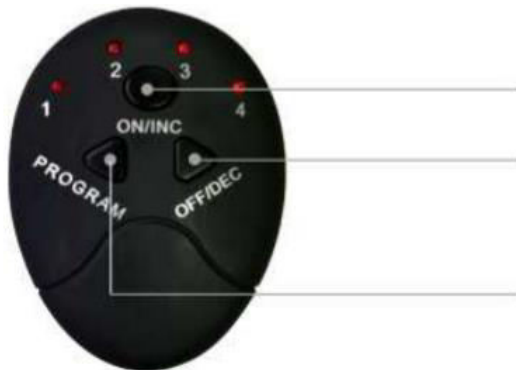


ON/INC: включване на захранването/увеличаване на интензитета

OFF/DEC: изключване на захранването/намаляване на интензитета

PROGRAM: превключване между програмите

Индикатори за режима на работа:

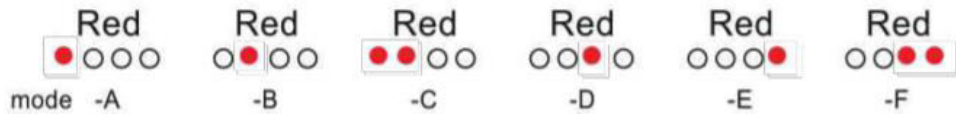

При натискане на бутона за включване/увеличаване на интензитета светлинният индикатор светва по-ярко и обратно, когато натиснете бутона за изключване/намаляване на интензитета, светлинният индикатор светва по-слабо.

- И двата бутона имат 10 нива
- Превключване между програми: избор между 6 режима (от А до F)
- Когато батерията се изтощи, махнете капака от отделението за батерията и сменете батерията, след което поставете отново капака.

5. Използване на електростимулатора {Six pack} – инструкции

- Винаги използвайте върху чиста и суха кожа
- Отстранете защитната лепенка от подложките с гел
- Поставете устройството върху желаната част на тялото (корем, крака, рамене и др.)

! НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО, ПРЕДИ ДА ГО ПОСТАВИТЕ ВЪРХУ ТЯЛОТО.

! НЕ ДОКОСВАЙТЕ ЗАЛЕПВАЩИТЕ ПОВЪРХНОСТИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЖИВОТА НА ПОДЛОЖКИТЕ С ГЕЛ.

6. Първа употреба

- Извадете устройството от кутията
- Поставете устройството върху желаната част на тялото
- Изберете желаната програма
- Настройте интензитета
- Продължителността на програмата е 12 минути
- Натиснете бутона за изключване многократно, докато светлинният индикатор не се изключи

Най-добре е устройството да се използва за максимум 12 минути без прекъсване, 2 – 3 пъти на ден. Ако го използвате по-дълго, може да се почувствате уморени.

Избягвайте използването на устройството 30 минути след хранене; Най-добре е да използвате устройството след къпане върху чиста и суха кожа

7. Грижа

- Изключете устройството след употреба.

- Поставете защитна лепенка върху подложките за гел, за да ги запазите лепкави и чисти.
- Почистете замърсяванията с влажна кърпа и деликатен почистващ препарат.
- Не излагайте на пряка слънчева светлина, топлина, влага, огън, електричество и др.
- Да се пази извън обсега на деца.
- Не докосвайте устройството с мокри ръце.
- Ако не използвате устройството дълго време, извадете батерията от контролера.

8. Смяна на батерията

- Отворете капака на отделението за батерията
- Поставете правилно батерията (обърнете внимание на знаците + и -)
- Поставете отново капака
- Включете устройството и проверете дали работи

ОБОБЩЕНИЕ:



1. Отворете отделението за батерията



2. Поставете батериите (2 x AAA)



3. Прикрепете контролера към устройството



4. Отлепете защитната лепенка



5. Прикрепете контролера към устройството



6. Поставете лентата на ръката/крака

